

Points de vigilance

- **Ne JAMAIS brancher ou débrancher une pièce à main avec l'appareil allumé.** Vous devez systématiquement éteindre l'appareil avant tout changement de pièce à main sous peine de causer de grave dommage sous l'appareil !
- **Ne JAMAIS brancher la prise d'alimentation sur une multi-prise ; L'appareil doit être directement branché au secteur.**
- **La température de la pièce doit être de 21°.**
- **Un temps de 15 minutes de pause doit être respecté entre chaque client.**
- **Aspirez régulièrement les grilles d'aération situées sur l'arrière de l'appareil**
- En cas de température trop haute dans la pièce ou de fortes utilisation, l'appareil peut se mettre en sécurité. L'appareil prend un temps de pause de 90 secondes pendant lequel il est nécessaire de n'avoir aucune action ni sur l'écran ni sur la pièce à main, sinon l'appareil repart pour 90 secondes de pause.

Règles de sécurité FORMA LIGHT TRAITEMENT IPL

- Pas d'exposition soleil 4 semaines avant et une semaine après
- Pas d'huile essentielle sur la zone une semaine avant
- Pas de gélules solaires une semaine avant
- Pas de spray auto bronzant une semaine avant

Espacement des séances


Séances	Protocole visage	Autres zones
1 à 2	4 semaines	6 semaines
2 à 3	4 semaines	6 semaines
3 à 4	4 semaines	6 semaines
4 à 5	4 semaines	6 semaines
5 à 6	4 semaines	6 semaines
6 à 7	6 semaines	8 semaines
7 à 8	6 semaines	8 semaines
8 à 9	6 semaines	8 semaines
9 à 10	6 semaines	8 semaines

Réglages Mélanine Meter

Mesure Mélanine Meter	Phototype
0 à 10	1
11 à 15	2
16 à 35	3
36 à 50	4
51 à 75	5
76 à 100	6

Pour optimiser vos résultats, vous pouvez régler l'appareil un phototype en dessus. Par exemple, si le mélanine meter vous donne un phototype 3, vous pouvez traiter la cliente en phototype 2 dans le respect des règles de sécurité et des flashs tests.

Vous avez également la possibilité d'augmenter la puissance de travail en appuyant sur l'onglet «Niveau de Puissance IPL» :

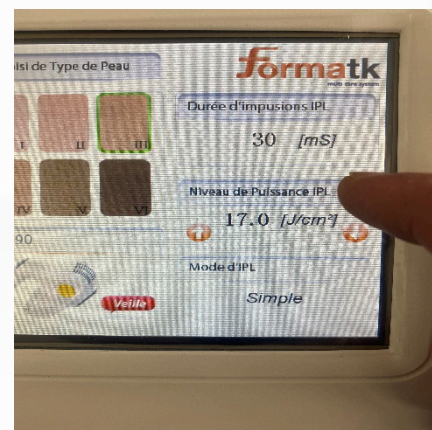

Protocole Traitements Photo Rajeunissement

- Le soin s'effectue avec une pièce à main 530 nm.
- En cas de rougeur modérée ou de sensation de chaleur, appliquez des compresses froides sur la peau et une crème apaisante après.
- Les patients doivent s'abstenir de s'exposer au soleil pendant la durée du traitement.
- Des croûtes peuvent apparaître après le traitement. Il est important de laisser les croûtes se détacher spontanément et de ne pas les gratter.
- Il est conseillé de poser un masque apaisant et hydratant suivant ce soin type masque Patch Expert « Cabine Exclusive ».

Protocoles : 3 à 5 séances espacées de 4 semaines

Grille tarifaire conseillée

- Visage : 30 minutes + 15 minutes Masque Patch Expert

1 séance	3 séances	5 séances
110 euros	290 euros	425 euros

Applicateur	Type de peau	Fluence (J/cm ²)	Mode Opérateur
S-530/L-530	I	21.8	Simple
	II	19.9	Simple
	III	18	Simple
	IV	14.2	Simple
	V	10.4	Simple

- Pour les phototypes 1 et 2, effectuer 2 passages. Mettre le gel froid, effectuer un passage en vertical. Enlever le gel, en remettre du frais et refaire un deuxième passage.
- Pour les phototypes 3, 4 et 5, effectuer 1 seul passage.

Protocole traitements Tâches pigmentaires

- Le traitement s'effectue avec une pièce à main 530 nm.
- Sélectionner l'onglet « Hyperpigmentation ».
- Il ne faut traiter que les tâches sans relief.
- √ Faire un test Milo sur la peau de la cliente = sélectionner son phototype.
- √ Faire un test Milo sur la tâche : si inférieur à 40 sélectionner tâche claire, si supérieur à 40 sélectionner tâches foncées.
- √ Régler l'appareil en augmentant les réglages (voir protocole tâches pigmentaires).
- √ Utiliser le pochoir pour délimiter les zones à travailler.

ATTENTION : il est conseillé de faire un premier traitement complet en mode photo rajeunissement pour traiter les tâches pigmentaires sur l'ensemble de la zone avant d'appliquer le protocole tâches pigmentaires.

Protocoles : 3 à 5 séances espacées de 4 semaines

Grille tarifaire conseillée

	1 séance	3 séances	5 séances
15 minutes	60 euros	165 euros	265 euros
30 minutes	100 euros	270 euros	400 euros

Réglages Lésions claires

Applicateur	Type de peau	Fluence (J/cm²)	Mode Opérateur	Température °C
S-530/L-530	I	21.8	Simple	3
	II	21.8	Simple	3
	III	21.8	Simple	3
	IV	20.9	Simple	2

Réglages Lésions foncées

Applicateur	Type de peau	Fluence (J/cm²)	Mode Opérateur	Température °C
S-530/L-530	I	21.8	Simple	2
	II	21.8	Simple	2
	III	21.8	Simple	2
	IV	20.9	Simple	1

Protocole Traitements Acné

- Le soin s'effectue avec la pièce à main 430 nm
- Une séance par semaine
- Effectuer 5 à 10 séances pour avoir un résultat optimal
- Possible de faire des séances régulières d'entretien
- Appliquer du gel frais sur la zone

Grille tarifaire conseillée

	1 séance	5 séances	10 séances
15 minutes	60 euros	265 euros	425 euros
30 minutes	100 euros	400 euros	640 euros

Applicateur	Type de peau	Fluence (J/cm²)	Mode Opérateur
S-430	I	21.9	Simple
	II	19.9	Simple
	III	18	Simple
	IV	14.2	Simple

Il est possible de faire 2 passages pour les phototypes 1 et 2, ou pour accentuer l'effet sur certaines zones plus problématiques.